


Control sencillo y ergonómico

Aspiración y dosificación de fuerza baja



Velocidad variable, fuerzas bajas

Las velocidades de aspiración/dosificación fácilmente ajustables ofrecen una mayor flexibilidad con varias soluciones y medios, y protección para células sensibles.

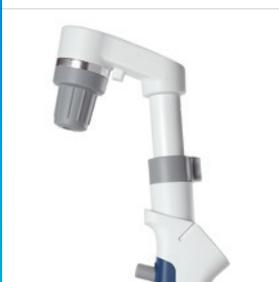

Cabezal telescópico

El cabezal telescópico del SP+ ofrece hasta 45 mm adicionales de altura para reducir la fatiga del brazo, lo que resulta especialmente útil en campanas extractoras en las que la puerta corredera puede limitar el rango de movimiento.



Uso sencillo

Su diseño ergonómico lo hace bien equilibrado y fácil de sujetar. El marco de soporte incluido permite que el instrumento descansa sobre la mesa entre usos.



Potente batería

La tecnología de carga rápida ofrece 15 horas de funcionamiento con una sola carga y hasta una hora de funcionamiento después de solo 10 minutos. Una pantalla LED indica el nivel de carga.



Controlador de pipetas Rainin SP+ Excepcionalmente fácil de usar

El Rainin SP+ combina de forma elegante una ergonomía superior y una tecnología de vanguardia con una serie de funciones prácticas. La exclusiva cabeza extensible ofrece una mayor flexibilidad y mejora la ergonomía, especialmente en espacios reducidos, como debajo de una campana de flujo. El SP+ se puede utilizar conectado al cable de carga o en el práctico juego de pared/estante Hang-Up™, que incluye un puerto de carga. Una válvula de retención incorporada y un filtro de membrana hidrofóbica reemplazable de 0,22 micras protegen los componentes internos. La carcasa del adaptador y el adaptador de la pipeta se pueden esterilizar en autoclave.

Controlador de pipetas Rainin SP+

Rainin SP+ ayuda a reducir costes al transferir volúmenes de líquido de 0,1 ml a 100 ml, y funciona con cualquier tipo de pipeta serológica (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml y 100 ml).

Aplicaciones específicas

- Cultivo celular
- Cultivo de bacterias y levaduras
- Preparación de la muestra
(extracción de ADN/ARN/proteínas)

Transferencia de líquidos

- Tampón
- Productos químicos
- Medios

Entorno

- En la mesa
- En la cabina de bioseguridad y química



Información para pedidos

Producto	Descripción	Número de material
Controlador de pipetas Rainin SP+	Controlador de pipetas Rainin SP+	30671415
Hang-up™ magnético	Hang-up magnético	30671310
Estructura de apoyo	Estructura de apoyo	30621248
Adaptador de corriente	Adaptador de corriente	30671311
Cono de aspiración	Cono de aspiración	30621241
Filtro (no esterilizado)	Filtro (no esterilizado) (1 ud.)	30621244
Filtro (esterilizado)	Filtro (esterilizado) (1 ud.)	30695285
Adaptador de pipeta	Adaptador de pipeta	30621247



Grupo METTLER TOLEDO
División de laboratorio
Contacto: www.mt.com/contacts

Sujeto a cambios técnicos
© 1/2022 METTLER TOLEDO. Todos los derechos reservados
Rainin y Hang-up son marcas comerciales de Mettler-Toledo Rainin, LLC.
30743932B
Impreso bajo demanda a partir del contenido en línea.
Rainin MarCom

mt.com/Rainin-SPplus

Para obtener más información