


工作流程更快、可重复性更高 经济实惠的便携式 96 通道移液



简化工作流程

96 通道移液器可显著减少移液步骤。MicroPro 的独特功能（如可编程吸头深度、可变吸液/分液速度以及保存/检索常用方案）可提高生产效率、减小误差并提高实验重现性。

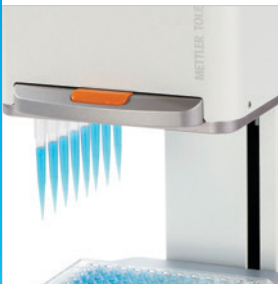


研发助手

MicroPro 不仅仅是一台孔板填充器，还可执行连续稀释，提供方便的移液模式（如多次吸液和自定义模式），并允许您自定义混合和吹液等操作。直观的软件和平板电脑使这一切变得简单。



自定义方案

MicroPro 不仅可以轻松创建和保存自定义方案，还可以按任何顺序执行各个步骤，并包含详细的用户说明，以确保准确度和一致性。

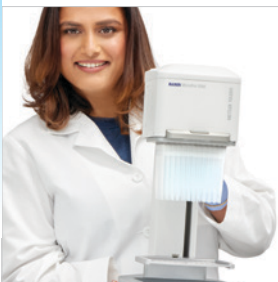

紧凑型设计

MicroPro 是市场上结构小巧的半自动 96 通道移液器，可节省生物安全柜或实验室工作台的宝贵空间。整个 MicroPro 产品组合真正可便携：
<15" 高、<7.5" 宽和 <12 磅。



Rainin MicroPro

卓越的易用性和出色的速度

对于快速填充、连续稀释和许多其他 96 和 384 孔板工作流程，Rainin MicroPro 紧凑型 96 通道移液器在速度和易用性方面具备优势。MicroPro 通过简化复杂的移液步骤简化了孔板工作流程，从而节省了时间，有助于消除孔板之间和用户之间的差异。此外，MicroPro 结构紧凑、性价比高且易于使用。

Rainin MicroPro

更快、更好的工作流程

- 20 µL、300 µL 和 1250 µL 型号
- 多功能移液
- 直观的触摸屏操作界面
- RingLock 吸头系统
- 移液深度调用
- 无接触式退吸头
- 保存的程序
- 10 倍速度控制



技术参数

性能	MP 20	MP 300	MP 1250
容量范围	2 - 20 µL	5 - 300 µL	50 - 1250 µL
系统误差 (每个通道)	20 µL±1.0% (0.20 µL) 10 µL±1.5% (0.15 µL) 2 µL±5.0% (0.10 µL)	300 µL ± 1.0 % (3.0 µL) 150 µL ± 1.5% (2.25 µL) 30 µL ± 1.5 % (0.45 µL) 15 µL ± 2.0% (0.30 µL)	1250 µL ± 1.8 % (22.5 µL) 625 µL ± 2.0 % (12.5 µL) 125 µL ± 2.5% (3.13 µL)
随机误差 (每个通道)	20 µL ≤ 0.5% (0.10 µL) 10 µL ≤ 1.0% (0.10 µL) 2 µL ≤ 3.0% (0.06 µL)	300 µL ≤ 1.0% (3.0 µL) 150 µL ≤ 1.0% (1.50 µL) 30 µL ≤ 1.0% (0.30 µL) 15 µL ≤ 2.0% (0.30 µL)	1250 µL ≤ 0.8 % (10.0 µL) 625 µL ≤ 1.0 % (6.25 µL) 125 µL ≤ 1.5% (1.88 µL)
尺寸和重量			
长度	240 mm (9.5 英寸)	216 mm (8.5 英寸)	216 mm (8.5 英寸)
宽度	190 mm (7.5 英寸)	190 mm (7.5 英寸)	190 mm (7.5 英寸)
高度	320 mm (12.6 英寸)	320 mm (12.6 英寸)	381 mm (15.0 英寸)
重量	5 kg (11 lbs)	5 kg (11 lbs)	5.4 kg (12 lbs)
电源			
输入（交流）	100 - 240V 1.6A 50 - 60Hz		
输出（直流）	24V 2.5A		

Rainin、Pipetting 360 +和 MicroPro 是 Mettler-Toledo Rainin, LLC 的商标。

订购信息

描述	最大容量	订货号
MicroPro 仪器		
MicroPro 20 – 北美		30835029
MicroPro 300 – 北美		30835028
MicroPro 1250 – 北美		30932001
MicroPro 20 – 全球		30852641
MicroPro 300 – 全球		30852640
MicroPro 1250 – 全球		30932002
MicroPro 移液器吸头		
MPR 20 µL LS 4800/50	20 µL	63305398
MPR 20 µL FL 4800/50	20 µL	63305397
MPR 300 µL LS 4800/50	300 µL	63305400
MPR 300 µL FL 4800/50	300 µL	63305399
MPR 1250 µL LS 960/10	1250 µL	63305538
MPR 1250 µL FL 960/10	1250 µL	63305537
条状吸头		
MPR 300 µL LS 条状 960/10	300 µL	63305551
MPR 300 µL FL 条状 960/10	300 µL	63305401
MicroPro 附件		
MPR 96/96 双托盘双嵌套，		30835030
MPR 96/384 双托盘双嵌套		30860787
MPR 384/384 双托盘双嵌套		30860786
NA: 北美; MPR: MicroPro; S: 已灭菌; F: 过滤器; L: 低吸附		

www.mt.com/rainin

了解更多信息

METTLER TOLEDO Group
本地联系方式: www.mt.com/contacts

如有技术更改，恕不另行通知
© 05/2025 METTLER TOLEDO. 保留所有权利
30878598 Rev D
Rainin MarCom